


Das ist das „Lauschi“

DAS HÖRGERÄT

DIE MIKROFONE

An den beiden Flächen und der äußeren Rückseite gibt es je ein kleines Mikrofon – insgesamt 3 Stück.

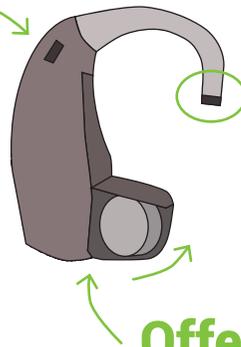

DER LAUTSPRECHER

Der Lautsprecher sitzt am Ende des ersten Schlauchteils, der fest mit dem Hörgerät verbunden ist.

Offen

Das Hörgerät hat am unteren Ende einen kleinen Schlitz. Hier kann man das Batteriefach öffnen, indem man mit dem Fingernagel in die kleine Kerbe geht und die Klappe aufschiebt.



Zu

DAS OHRPASSTÜCK

Das Ohrpassstück ist ein passgenaues Formstück zur Ohrmuschel. Es wird durch einfaches Aufstecken des Schalleitungsschlauchs auf den Lautsprecher mit dem Hörgerät verbunden.

UMGANG IN BESONDEREN SITUATIONEN:

Fällt das „Lauschi“ in den Sand, putzen Sie es bitte mit einem trockenen und sauberen Tuch oder einem Kleidungsstück ab. Das Ohrpassstück sollte komplett von Sand frei sein bevor es wieder in das Ohr eingesetzt wird. Geht der Sand nicht ab, können Sie das Ohrpassstück auch unter fließend Wasser abspülen. Hierbei in jedem Fall das Hörgerät vorher entfernen! Hat sich Sand in die Mikrofone oder den Lautsprecher gesetzt, suchen Sie bitte Ihren Akustiker für eine Reinigung auf.

Fällt das „Lauschi“ ins Wasser, schütteln Sie das Wasser zunächst ab. Trennen Sie Hörgerät und Ohrpassstück voneinander. Legen Sie das Hörgerät umgehend mit geöffnetem Batteriefach auf eine Heizung bzw. in die dafür vorgesehene Trocknungsschale. Das Ohrpassstück pusten Sie am besten mit dem Puster durch bis kein Wasser mehr rauskommt. Falls noch Tröpfchen im Schlauch zu sehen sind legen Sie auch das Ohrpassstück in die Trocknung.

Fällt das „Lauschi“ in Saft, Tee oder Milch, gehen Sie im Grunde vor wie bei Wasser. Falls Sie ein Feuchttuch (nicht Öl-basiert!) zur Hand haben, putzen Sie damit das Hörgerät und reiben Sie es danach mit einem saugfähigen Tuch ab, damit keine chemischen Rückstände auf dem Hörgerät verbleiben. Halten Sie das Hörgerät auf keinen Fall unter Wasser. Das Ohrpassstück können Sie unter fließend Wasser säubern. Suchen Sie so bald wie möglich Ihren Akustiker für eine Reinigung auf.